

EXAMINATION LAMP LP03-5W

Buku petunjuk penggunaan



Daftar Isi

I	Pengenalan singkat.....	3
II	Ringkasan Fitur:.....	3
III	Parameter teknis utama :	4
IV	Tips keamanan dan panduan tombol.....	4
V	Lingkungan Kerja	4
VI	Antarmuka pengoperasian.....	4
VII	Metoda Penggunaan.....	6
VII	Catatan.....	7
IX	Penilaian Kesalahan kinerja dan Cara Mengatasinya.....	8
X	Penggantian bola lampu	8
XI	Garansi pelayanan purna jual.....	8
XII	Kondisi transportasi dan penyimpanan	9
XIII	Diagram skematik listrik dan daftar komponen.....	9

I Pengenalan singkat

Lingkup aplikasi : Digunakan untuk pemeriksaan umum dengan kebutuhan penerangan sederhana.

Karakteristik : Semua jenis lampu pemeriksaan dapat digunakan dengan klip dinding, klip meja dan penyangga lantai. Memiliki fitur dengan operasi sederhana , mudah dipasang, bertegangan rendah dan aman. Dapat digunakan di klinik, rumah sakit umum, bangsal, dan rumah sakit komunitas dan rumah sakit lapangan tentara dan sebagainya.

Komponen produk: Terutama oleh penahan lampu, tiang lampu, kotak listrik, dan komponen lainnya.

II Ringkasan Fitur:

Lampu pemeriksaan dirancang dengan tegangan input luas, catu daya output tegangan yang rendah , memiliki kinerja yang stabil , aman dan andal, dan jenis penggunaan yang luas.

Desain dan produksi sumber cahaya, secara ketat mentaati bagian pertama dari persyaratan keselamatan peralatan listrik medis SNI IEC60601-1 : Peralatan elektromedik - Bagian 1 : Persyaratan umum keselamatan dasar dan kinerja esensial.

SIMBOL	ARTI
	Simbol untuk penandaan peranti elektronik sesuai dengan directive 2002/96/EC. Limbah peranti, aksesoris dan kemasan harus dibuang dengan benar pada akhir penggunaan. Ikutilah peraturan dan regulasi local untuk pembuangan
	Perhatian,bacalah dokumen yang menyertai
	Instruksi membaca di buku manual

	Arde
---	------

III Parameter teknis utama :

Tipe	Tegangan Input	Daya Bohlam	Temperature Warna	CRI
LPP 03-5w	110V~220V/50~60HZ	5W	6000±500K	80%

IV Tips keamanan dan panduan tombol

1. Saat lampu pemeriksaan sedang digunakan, anda sebaiknya selalu mematuhi tindakan keselamatan pencegahan dasar dalam rangka untuk menghindari kebakaran, tersetrum atau yang akan berisiko cedera
2. Silahkan baca yang petunjuk dengan teliti, dan operasikan sesuai dengan yang spesifikasi dan persyaratan.
3. Penggantian sekering harus menggunakan yang sama dengan yang tertera pada penandaan.
4. Saat tidak digunakan, cabut kabel daya.
5. Simbol grafis: "ON" dan " I " untuk menghidupkan daya, " OFF " dan " O " untuk mematikan daya.

V Lingkungan Kerja

Suhu lingkungan: 5°C, -40°C

Kelembaban relatif: ≤ 85%

Tekanan atmosfer: 86.0-106 . 0kPa

VI Antarmuka pengoperasian

1. Antarmuka Lampu : Ada tiga jenis lampu pemeriksaan, selain bentuk , ukuran, perbedaan daya, perakitan dan metode operasinya pada dasarnya sama. Antarmukanya adalah sebagai berikut:


① Sakelar daya

- ② Dudukan lampu
- ③ Selang tiang lampu
- ④ Tabung keras tiang keras
- ⑤ Colokan koneksi T
- ⑦ Soket adaptor
- ⑧ Pegangan
- ⑨ Kotak daya
- ⑩ Lampu indikator
- ⑪ Penyesuaian titik lampu



gambar 1

2. Antarmuka aksesoris: Lampu pemeriksaan memiliki lima jenis aksesoris untuk dipilih. Lampu utama manapun yang anda pilih, dapat digunakan dengan aksesoris apa pun. Antarmuka sebagai berikut:
3. ⑫ Konektor T ⑬ Sekrup penjempit ⑭ Sekrup pengunci ⑮ Papan basis dasar untuk tempel dinding ⑯ Papan basis sekrup ⑰ Tiang roda ⑱ Pengunci tiang ⑲ Sekrup konektor T ⑳ tiang Pilar

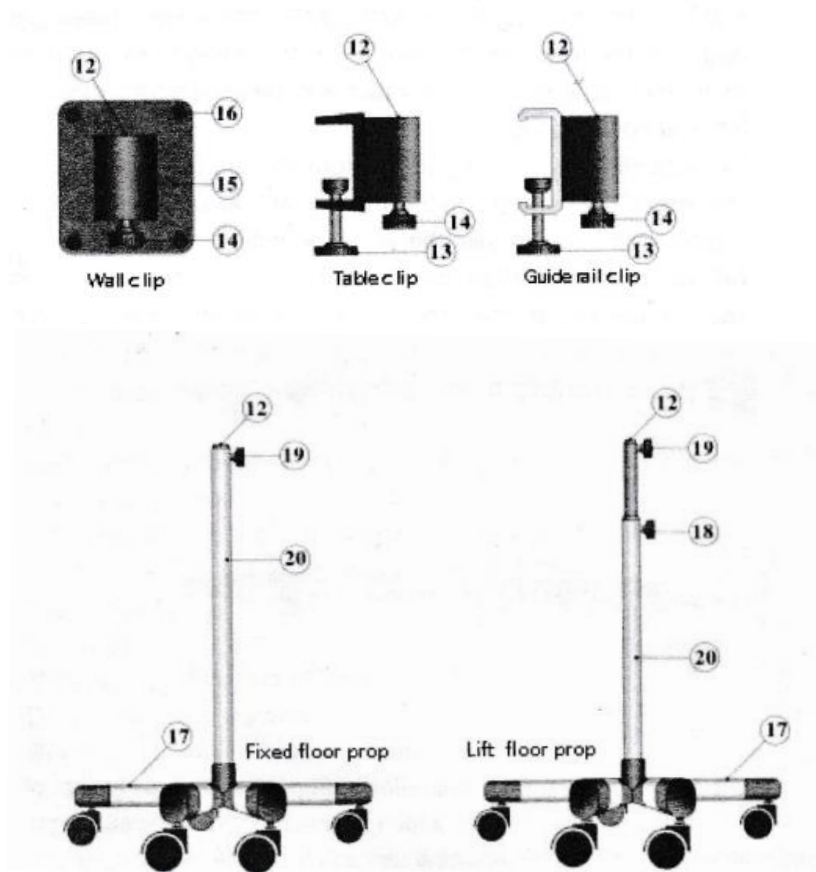


Gambar 2

VII Metoda Penggunaan

1. Buka kotak kemasan, periksa sesuai dengan daftar produk apakah ada bagian yang hilang atau terdapat kerusakan produk. Jika terdapat masalah, silakan kontak agen atau produsen.
2. Sesuaikan berdasarkan produk yang anda beli, model dan gambar digunakan untuk mendapatkan petunjuk yang sesuai, perakitan umum dan metode pengoperasian yang dijelaskan dalam bagian ini memiliki kesamaan-kesamaan.
3. Instalasi pada dinding, pastikan untuk menginstal pada posisi yang tepat dari para dinding, sesuai dalam ukuran dari 3-l, dengan diameter pengencang 6mm pada empat lubang pemasangan dengan kedalaman 30mm, cocok dengan tabung menonjol, gunakan sekrup ① 4mm agar aman dipasang pada klip dasar papan dinding⑮ pada dinding, (lihat Gambar 3-1,2) . Masukkan konektor T ⑤ di bagian bawah kotak daya ke soket T ⑫ , kencangkan sekrup pengunci ⑭ . Pasang klip meja dan sesuaikan klip pada

posisi yang sesuai, lalu kencangkan baut lampu⁽¹³⁾ , masukkan dan kencangkan lampu pemeriksaan, lalu kencangkan sekrup pengunci ⁽¹⁴⁾.

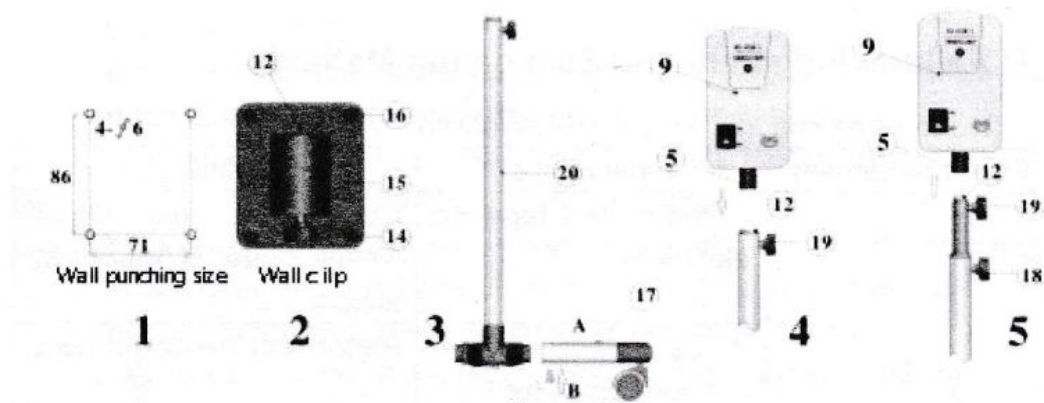

Gambar 3

4. Penyangga lantai, pasang terlebih dahulu Tiang pilar dan roda pada lima kaki (lihat Gambar 3-3) kencangkan sekrup pengunci sebagai bagian B.
5. Penyangga memiliki dua jenis setelan ketinggian. Metode pasang tetap sama, sesuai dengan metode pada Gambar 3.
6. Lampu pemeriksaan mudah untuk digunakan. Hubungkan daya pada tegangan jala jala, hidupkan sakelar daya ⁽¹⁾ , setelah itu lampu dapat bekerja. Dengan merubah posisi pipa flexible dan kedudukan lampu , anda dapat mengubah arah radiasi dan sudut lampu. kenob putar ⁽¹¹⁾ dapat mengubah ukuran spot , potensiometer putar ⁽⁶⁾ dapat mengubah ukuran kecerahan.

VII Catatan

1. Harap cabut steker listrik sebelum membersihkan lampu, jangan gunakan semprotan cair untuk membersihkan lampu.
2. Ketika menginstal, merakit dan memperkuat lampu ikuti instruksi sesuai dengan persyaratan teknis.
3. Jangan menggunakan lampu dekat air .
4. Jangan pernah menaruh benda apa pun pada kabel listrik .
5. Intensitas cahaya iluminasi tinggi, anda harus berhati-hati dengan mata anda pada saat penggunaan lampu.

IX Penilaian Kesalahan kinerja dan Cara Mengatasinya

(Ini harus dilakukan oleh teknisi profesional)

Kesalahan	Penyebab Kesalahan	Solusi
Cahaya tidak terang	1. Jalur daya listrik tidak memiliki daya listrik	Hubungkan ke sirkuit di mana terdapat pasokan listrik
	2. Kabel listrik tidak terhubung dengan baik	Sambungkan kembali kabel daya
	3. Tombol penyesuai titik cahaya tidak terbuka.	Buka tombol penyesuai titik cahaya.
	4. Sekering putus	Ganti sekering
	5. Kerusakan pada papan daya	Kembalikan pada pabrikan untuk diperbaiki.

X Penggantian bola lampu

Jenis lampu produk ini berjenis LED . Usia pemakaian normal adalah sekitar 50.000 jam. Secara umum tidak diperlukan dilakukan penggantian . Jika ditemukan cacat pada produk, mohon menghubungi pabrikan untuk mendapatkan pemeliharaan yang sesuai.

XI Garansi pelayanan purna jual

Dukungan layanan pemeliharaan diberikan pada masa garansi selama 12 bulan.

- Selama dalam masa garansi , dalam penggunaan normal , masalah yang dikarenakan kualitas produk, konsumen harus memiliki slip garansi dan faktur pembelian untuk mendapatkan layanan pemeliharaan gratis .
- Jika kesalahan yang disebabkan oleh pemasangan kembali atau menginstal fungsi lain yang dimana tanpa izin perusahaan kami, adalah tidak dalam cakupan garansi.
- Jika model, nomor, tanggal produksi diubah, dihapus, dipindahkan atau tidak dikenali, tidak akan mendapatkan layanan pemeliharaan gratis .
- Kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia seperti jatuh, teremas, tercelupkan , basah, dll. Tidak dalam cakupan garansi.

- Setelah menerima barang, harap tandatangani dan terima setelah membuka paket untuk memeriksa dan mengkonfirmasi apakah instrumen tersebut hancur, tergores atau tidak. Pastikan tidak ada bagian yang tidak lengkap . Jika barang terdapat kerusakan dan anda tidak memeriksa sebelum menandatangani, itu akan menjadi risiko Anda sendiri.


XII Kondisi transportasi dan penyimpanan

A. Suhu lingkungan: -40°C -55°C

B. Kelembaban relatif: $\leq 90\%$

C. Atmosfer: 50KPa ~ 106Kpa

XIII Diagram skematik listrik dan daftar komponen

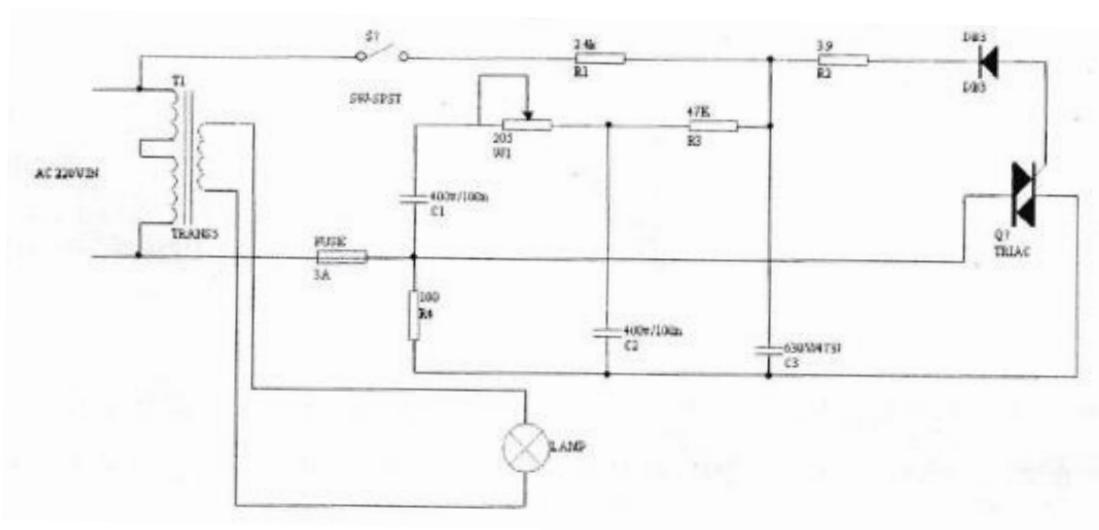

No	Nama komponen	Spesifikasi	Jumlah
1	Circuit board		1
2	Bilateral diode	DB3	1
3	Restance	2.4K/0.25W	1
4	Restance	39Ω/0.25W	1
5	Restance	47K/0.25W	1
6	Restance	100Ω/0.25W	1
7	Restance	2K	1
8	Capacitance	100nf/400V	2
9	Capacitance	437J/630V	1

10	Power transformer	30W	1
11		BTA06D	1
12		F2A-L250	1

Produk dapat diperbarui atau ditingkatkan. Perubahan pada rangkaian atau spesifikasi produk tidak akan tanpa pemberitahuan sebelumnya .